

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE - priloga

naziv **MENJAVA PRETOČNEGA SETA PRI PERITONEALNI DIALIZI**

koda **20.14**



Na razkuženo delovno površino si pripravimo ves material, ki ga bomo rabili za zamenjavo pretočnega seta



Odgrnemo bolnikova oblačila, tako da nas ne bodo motila pri izvedbi posega



Roke si temeljito razkužimo; Odkrijemo izstopišče peritonealnega katetra; Nato si ponovno razkužimo roke



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE



Odpremo set za menjavo pretočnega seta in jodovo objemko;

Odpremo tudi steklenico z jodno raztopino;

Na eno roko si nadenemo sterilno rokavico in z njo razporedimo material v setu za zamenjavo pretočnega seta ter v posodico damo nekaj zloženčkov, ki jih bomo uporabili za razkuževanje;

Z neorokavičeno roko nato primemo steklenico z jodno raztopino in prelijemo zloženčke, ki smo jih prej dali v posodico



Nato si še nadenemo drugo sterilno rokavico;

Vzamemo si sterilen zloženček in z njim dvignemo pretočni set;



Podložimo sterilno kompreso pod peritonealni kateter



Kateter zažmemo z dvema sterilnima ščipalkama, ki ju namestimo tako, da gledata ena proti drugi



Nato 1 minuto razkužujemo z zloženčki, ki so preliati z jodno raztopino, spoj titanijskega vmesnika s pretočnim setom in peritonealni kateter



Nato namestimo jodovo objemko na spoj titanijskega vmesnika in pretočnega seta



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE



Jodovo objemko vrtimo tako dolgo dokler ne pride jod v kontakt s celotno površino



*Vse skupaj pustimo delovati 5 minut;
Iztopišče katetra lahko zaščitimo, tako da ga pokrijemo s sterilnim zloženčkom; Rokavice nato zavržemo in si razkužimo roke*



Med tem odpremo nov pretočni set in ga izpustimo iz ovoja na sterilno površino v set za zamenjavo pretočnega seta



*Po petih minutah si nadenemo novi par sterilnih rokavic;
S sterilnima zloženčkoma ali s sterilno prijemalko odstranimo betadinski ščitnik (lahko ga povlečemo preko spoja na star pretočni set);*



Nato odvijemo star pretočni set (z prosto roko ali pa s pomočjo prijemalk),



*Nato s pomočjo sterilnega zloženčka primemo nov transfer set;
Prosimo bolnika, da nam sname plastično zaščito s pretočnega seta, mi pa ga nato privijemo na titanijski vmesnik; Če nam bolnik ne more pomagati, odložimo peritonealni kateter na sterilno kompreso, si sami snamemo plastično zaščito in nato privijemo pretočni set na titanijski vmesnik,*



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE



Pretočni set še lahko z občutkom dodatno privijemo s peanoma



Zapremo navoj na pretočnem setu



Šele potem odstranimo ščipalki z katetra (če ne bomo delali takoj zamenjave dializne raztopine zamenjamo plastično zaščito s pretočnega seta z novim jodovim pokrovčkom za pretočni set)



Na koncu (ali med menjavo dializne raztopine) še naredimo toaleta izstopišča peritonealnega katetra



Dobro zaščitimo izstopišče peritonealnega katetra



Nato imobiliziramo peritonealni kateter in pretočni set na bolnikovo telo



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE


19 MENJAVA TRANSFER SETA						
February 28	March 31	April 30	May 31	June 30	July 31	A
2.11.04 P		5.11.04 REKREACIJSKI OPRABLJAN				2.11.04 P
PERITONEALIS	20.04	10.11.04	17.05	1.06	8.06	1
2.3.04		2.11.04 20.04	3.11.04	2.11.04 3.06	10.06	
1.11.05		4.11.05 TEKNOLOGIJSKI				
9.11.05 - HANDBOK (LETA)		12.11.05				

Dokumentiramo ves poseg in zabeležimo datum naslednje predvidene menjave pretočnega seta



priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

*Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail tajnstvo@zbornica-zveza.si*

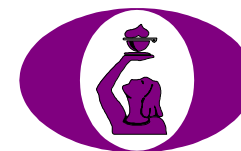

NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE

naziv

koda